

ARION Easy-Off



EN	Doffing aid for medical compression stockings	Instructions for use	2
DE	Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe	Gebrauchsanleitung	4
NL	Uittrekhulp voor medische compressiekousen	Gebruiksaanwijzing	6
FR	Aide au retrait de bas de compression médicale	Mode d'emploi	8
ES	Descalzador de medias de compresión médica	Instrucciones de uso	10
PT	Auxiliar para descalçar meias de compressão médica	Instruções de utilização	12
IT	Dispositivo per togliere le calze compressive medicali	Istruzioni per l'uso	14
DA	Hjælp til aftagning af kompressionsstrømper	Brugsanvisning	16
SV	Avklädningshjälpmedel för medicinska kompressionsstrumpor	Bruksanvisning	18
NO	Avtakingshjelp for medisinske kompresjonsstrømper	Bruksanvisning	20
FI	Riisumisen apuväline lääkinällisille kompressiosukille	Käyttöohjeet	22

Arion Easy-Off

Doffing aid for medical compression stockings

Important information before you start using the product:

- A. If you have difficulty to reach your toes, please place your foot on a low chair to avoid bending too much.
- B. Wear special non-slip gloves when using the product. This gives you maximum grip on the stocking and reduces the physical strength needed.



Doffing instructions:

1. Slide the Easy-Off over the stocking
2. Fasten the Velcro strap firmly just above the ankle
3. Fold the spare material down over the Velcro strap as far as possible
4. Fold the stocking over the Easy-Off as far as possible
5. With small movements, starting at the heel, slide the stocking and the Easy-Off over the foot

SIZING


REF	Size	Size Shoe EU	Shoe size UK		Shoe size US	
			women	men	women	men
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Easy-Off from Arion Slide Solutions minimizes friction between compression garment and skin thanks to the product's unique sliding properties provided by the special material it is made of and by its coating. The friction reduction is particularly helpful to slide the garment over the heel area, which is the broadest part of the foot.

EASY, SAFE AND SIMPLE SOLUTION

- Reduces physical strain for both compression wearers and caregivers
- May contribute to a longer life for the garment and to maintaining the original compression longer by preventing damage from fingers or nails and avoiding overstretching and distortion
- Promotes independence of compression wearers and supports therapy compliance

COMPOSITION

- Product: Polyamide 92%, Polyurethane 3%, Silicone 2%, Polyester 3%
- Package: Chromo carton GC1 (PAP21) 


CONTRAINDICATIONS

- Do not use the product if you are allergic to one of its component (see composition).
- Open wounds should be covered with an appropriate dressing before using the product.


WARNINGS

- **Suffocation hazard:** Keep the product away from babies, children, and pets.
- **Slipping hazard:** Do not step on the product. Highly slippery material.
- **For external use only /** Intended for skin contact. Seek medical attention if irritation develops.

IMPORTANT

-  Please **read the instructions for use carefully**. If you have any questions, please contact your reseller.
- **Please keep the package and the instructions for use during the time of use of the product.**
- All **serious incidents** that occur when using the product **should be reported** to the manufacturer and the competent supervisory authority.
- When using the product it is important to **use the right product size** for the user. Using an incorrect size will prevent the product from working properly, and it may become damaged or wear out too quickly. The correct size is determined by your shoe size.
- **Use the product on a single person.** If the product needs to be used on more than one person, disinfect the product before with a 70% ethanol solution.

STORAGE

Keep away from direct sunlight or other heat sources. 


CARE INSTRUCTIONS

- Wash by hand, at max. 30°C/86°F.
- Do not bleach.
- Do not tumble dry. Dry the product only with a towel.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Disinfection possible with a 70% ethanol solution.

GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of six months from the date of purchase against defects resulting from faulty material or construction. Within the guarantee period, the product will be exchanged free of charge in the case of manufacturing and/or material defects. Any exchange under the guarantee will only be carried out if it can be demonstrated by means of a purchase receipt that the date on which the complaint was lodged falls within the guarantee period. The guarantee does not apply if the defect is due to improper use of the product or use on several patients. To use this service you need to contact your supplier. You are asked to return the product washed and to follow the care instructions.

RECOMMENDATION FOR USE

 The manufacturer recommends replacing the product six months after the first use if the product is used regularly.

You can write the date of first use on the back of this document.

Watch our **instruction video** here: uqr.to/OffEN or scan this QR code:



More information on www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

Wichtige Informationen, bevor Sie das Produkt verwenden:

- A.** Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Zehen zu erreichen, stellen Sie Ihren Fuß bitte auf einen niedrigen Stuhl, um ein zu starkes Bücken zu vermeiden.
- B.** Tragen Sie spezielle Anti-Rutsch-Handschuhe, wenn Sie das Produkt verwenden. Damit haben Sie einen optimalen Halt auf dem Strumpf und reduzieren die benötigte körperliche Anstrengung.



Aus

Anleitung zum Ausziehen:

- 1.** Den Easy-Off über den Strumpf ziehen
- 2.** Das Klettband direkt über dem Knöchel fest schließen
- 3.** Den oberen Teil des Easy-Off so weit wie möglich über das Klettband umschlagen
- 4.** Den Strumpf soweit wie möglich über den Easy-Off umklappen (bis an das Klettband)
- 5.** Den Strumpf und den Easy-Off mit kleinen Bewegungen ausgehend von der Ferse über den Fuß schieben

GRÖßENBESTIMMUNG

REF	Größe	Schuhgröße EU	Schuhgröße UK		Schuhgröße US	
			Damen	Herren	Damen	Herren
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Easy-Off von Arion Slide Solutions minimiert die Reibung zwischen Kompressionsversorgung und Haut dank der einzigartigen Gleiteigenschaften des verwendeten Materials und seiner speziellen Beschichtung. Die Reduzierung der Reibung ist besonders nützlich, um einen Strumpf oder eine Strumpfhose über den Fersenbereich zu schieben, welcher die breiteste Stelle des Fußes ist.

EINFACHE, SICHERE UND SIMPLE LÖSUNG

- Reduziert die körperliche Belastung für Kompressionsträger und Pflegepersonal
- Kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Versorgung zu verlängern und die ursprüngliche Kompression länger aufrechtzuerhalten, da Finger- oder Nagelschäden sowie eine übermäßige Dehnung und Verformung der Versorgung verhindert werden können
- Fördert die Unabhängigkeit des Kompressionsträgers und unterstützt die Therapietreue

ZUSAMMENSETZUNG

- Produkt : Polyamid 92%, Polyurethan 3%, Silikon 2%, Polyester 3%
- Verpackung: Chromokarton GC1 (PAP21) 


KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch reagieren (siehe Zusammensetzung).
- Offene Wunden müssen vor der Anwendung des Produkts mit einem geeigneten Verband abgedeckt werden.

WARNUNGEN

- **Erstickungsgefahr:** Halten Sie das Produkt von Säuglingen, Kindern und Haustieren fern.
- **Rutsch- und Sturzgefahr:** Treten Sie nicht auf das Produkt. Sehr rutschiges Material.
- **Nur zur äußerlichen Anwendung /** Nur für den Hautkontakt bestimmt. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Reizung entsteht.

WICHTIG

-  Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung während der Nutzungsdauer des Produkts auf.
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der bei der Verwendung des Produkts auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
- Es ist wichtig, die richtige Produktgröße für den Anwender zu verwenden. Die Verwendung einer falschen Größe verhindert die ordnungsgemäße Funktion des Produkts und kann zu Schäden oder zur schnelleren Abnutzung führen. Die richtige Größe wird durch die Schuhgröße bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für eine einzige Person. Wenn das Produkt bei mehr als einer Person verwendet werden soll, desinfizieren Sie es vorher mit einer 70%igen Ethanollösung.

LAGERUNG

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. 


PFLEGEHINWEISE

- Handwäsche, maximal 30°C/86°F.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen. Trocknen Sie das Produkt nur mit einem Handtuch.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Kann mit einer 70%igen Ethanollösung desinfiziert werden.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Während der Garantiezeit kann das Produkt bei Verarbeitungs- und/oder Materialfehlern gegen Vorlage eines gültigen Kaufbelegs kostenlos umgetauscht werden (der Anspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden). Die Garantie verfällt, wenn der Defekt infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder einer Verwendung durch mehrere Patienten entstanden ist. Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie sich an Ihren Händler wenden. Bitte geben Sie das Produkt gereinigt zurück, entsprechend der Pflegehinweise.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

 Der Hersteller empfiehlt, das Produkt sechs Monate nach der ersten Verwendung auszutauschen, wenn das Produkt regelmäßig verwendet wird.

Sie können das Datum der ersten Verwendung auf der Rückseite dieses Dokuments vermerken.

Anleitungsvideo hier anschauen: uqr.to/OffDE
oder diesen QR-Code scannen:



Mehr Informationen auf www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Uittrekhulp voor medische compressiekousen

Belangrijke informatie voordat u het product gaat gebruiken:

- A.** Heeft u moeite om bij uw tenen te komen? Plaats dan uw voet op een krukje om te voorkomen dat u te ver voorover moet buigen.
- B.** Draag speciale antisliphandschoenen bij het gebruiken van het product. Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke kracht nodig.



Uit

Uittrekken:

1. Schuif de Easy-Off over de kous
2. Maak het klittenband net boven de enkel stevig vast
3. Vouw het overblijvende materiaal zo ver mogelijk over het klittenband
4. Vouw de steunkous zover mogelijk over de Easy-Off
5. Schuif de steunkous en de Easy-Off dan met kleine bewegingen, te beginnen bij de hiel, over de voet

MAATVOERING


REF	Maat	Schoenmaat EU	Schoenmaat UK		Schoenmaat US	
			dames	heren	dames	heren
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Easy-Off van Arion Slide Solutions minimaliseert de wrijving tussen de steunkous en de huid dankzij de unieke glij-eigenschappen van het speciale materiaal waarvan het product is gemaakt, en de coating. De geringere wrijving is vooral handig om de steunkous over het breedste deel van de voet, de hiel, te schuiven.

GEMAKKELIJKE, VEILIGE EN EENVOUDIGE OPLOSSING

- Vermindert de fysieke belasting voor zowel dragers van steunkousen als zorgverleners
- Kan bijdragen aan een langere levensduur van de steunkous en aan het langer behouden van de oorspronkelijke compressiewerking door beschadiging door vingers of nagels te voorkomen en te ver uitrekken en vervormen van de steunkous te verhinderen
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van steunkousen en stimuleert het gebruik ervan

SAMENSTELLING

- Product: polyamide 92%, polyurethaan 3%, silicone 2%, polyester 3%
- Verpakking: Chromokarton GC1 (PAP21) 


CONTRA-INDICATIES

- Het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de componenten (zie samenstelling).
- Voor het gebruik van het product moeten open wonden worden afgedekt met een geschikt verband.

WAARSCHUWINGEN

- **Verstikkingsgevaar:** houd het product uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren.
- **Gevaar voor uitglijden:** niet op het product stappen. Erg glad materiaal.
- **Uitsluitend voor uitwendig gebruik/bedoeld voor huidcontact.** Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

BELANGRIJK

-  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
- Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing zolang u het product gebruikt.
- Meld alle ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van het product aan de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instantie.
- Het is belangrijk om bij het gebruik de juiste maat van het product voor de betreffende gebruiker te kiezen. Als een verkeerde maat wordt gebruikt zal het product niet correct werken en mogelijk beschadigen of overmatig snel slijten. De juiste maat is afhankelijk van uw schoenmaat.
- Gebruik het product exclusief voor een bepaalde persoon. Moet het product voor meer dan een persoon worden gebruikt? Desinfecteer het product dan voor gebruik met een 70% ethanoloplossing.

BEWAREN

Uit te buurt houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. 


ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Met de hand wassen op max. 30 °C/86°F.
- Niet bleken.
- Niet drogen in een wasdroger. Droog het product uitsluitend af met een handdoek.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.
- Kan worden gedesinfecteerd met een 70% ethanoloplossing.

GARANTIE

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van defecte materialen of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode wordt het product bij fabricage- en/of materiaal fouten kosteloos vervangen. Producten worden onder garantie alleen vervangen als met een aankoopbewijs kan worden aangetoond dat de datum waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt. De garantie is niet van toepassing als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, of van gebruik bij verschillende personen. Neem voor vragen over garantie contact op met uw leverancier. We vragen u het product gewassen terug te sturen en de onderhoudsinstructies op te volgen.

AANBEVELING VOOR GEBRUIK

 De fabrikant adviseert om het product, als het regelmatig wordt gebruikt, zes maanden na het eerste gebruik te vervangen.

U kunt de datum van het eerste gebruik op de achterkant van dit document noteren.

U kunt onze instructievideo bekijken op: uqr.to/OffNL of deze QR-code scannen:



Aanvullende informatie kunt u vinden op www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off / Arion Retrait facile

Aide au retrait de bas de compression médicale

Informations importantes avant de commencer à utiliser le produit

- Si vous avez des difficultés à atteindre vos orteils, placez votre pied sur une chaise basse pour éviter de vous pencher trop.
- Portez des gants antidérapants spéciaux lorsque vous utilisez le produit. Cela vous permet d'avoir une adhérence optimale sur le bas et de réduire la force physique nécessaire.



Retrait

Instructions pour le retrait :

- Enfiler l'Easy-Off par-dessus le bas
- Attacher la bande velcro fermement juste au-dessus de la cheville
- Rabattre la partie supérieure du produit au dessus de la bande velcro autant que possible
- Rabattre le haut du bas au dessus de l'Easy-Off autant que possible
- Par petits mouvements, en commençant par le talon, faites glisser le bas et l'Easy-Off par dessus le pied pour les retirer

CHOIX DE LA TAILLE

REF	Taille	Pointure EU	Pointure R.U.		Pointure É.U.	
			femme	homme	femme	homme
Eo 1510	S - P	34 - 37	1 ^{1/2} - 4 ^{1/2}	2 ^{1/2} - 4	4 - 6 ^{1/2}	3 - 5
Eo 1511	M - M	38 - 41	5 - 7	4 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	7 - 9	5 ^{1/2} - 7 ^{1/2}
Eo 1512	L - G	42 - 45	7 ^{1/2} - 10	8 - 11	9 ^{1/2} - 11 ^{1/2}	8 - 10

Easy-Off d'Arion Slide Solutions minimise la friction entre le vêtement de compression et la peau grâce aux propriétés de glissement uniques du matériau utilisé et de son enduit spécial. La réduction de la friction est particulièrement utile pour faire glisser un bas ou collant par dessus la zone du talon qui est la partie la plus large du pied.

UNE SOLUTION FACILE, SÛRE ET SIMPLE

- Réduit les contraintes physiques pour les porteurs de vêtements de compression et les soignants
- Peut contribuer à prolonger la durée de vie du vêtement et à maintenir la compression initiale plus longtemps en évitant les dommages causés par les doigts ou les ongles et en évitant les étirements excessifs et la déformation du vêtement
- Favorise l'indépendance des porteurs de compression et encourage la fidélité à la thérapie

COMPOSITION

- Produit : polyamide 92%, polyuréthane 3%, silicone 2%, polyester 3%
- Emballage : Chromocarton GC1 (PAP21)

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants (voir composition).
- Les plaies ouvertes doivent être recouvertes d'un pansement approprié avant d'utiliser le produit.

⚠️ AVERTISSEMENTS

- Risque de suffocation :** Tenir le produit éloigné des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Risque de glissade et de chute :** Ne pas marcher sur le produit. Matériau très glissant.
- Usage externe uniquement /** Destiné au contact avec la peau. Consulter un médecin si une irritation se développe.

IMPORTANT

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez conserver l'emballage et le mode d'emploi pendant la période d'utilisation du produit.
- Tout incident grave** survenant lors de l'utilisation du produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité de surveillance compétente.
- Il est important d'utiliser la bonne taille du produit adaptée à l'utilisateur. L'utilisation d'une taille incorrecte empêchera le produit de fonctionner correctement et il risque d'être endommagé ou de s'user trop rapidement. La bonne taille est déterminée par la pointure des chaussures.
- Utiliser le produit sur une seule personne.** Si le produit doit être utilisé sur plusieurs personnes, désinfectez-le d'abord avec une solution à base de 70% d'éthanol.

STOCKAGE

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Laver à la main, au maximum à 30°C/86°F.
- Ne pas utiliser d'eau de javel.
- Ne pas faire sécher au sèche-linge. Sécher le produit uniquement à l'aide d'une serviette.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Désinfection possible avec une solution à base de 70% d'éthanol.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant une période de six mois à compter de la date d'achat contre tout défaut au niveau des matériaux ou de la fabrication. Pendant la période de garantie, le produit pourra être échangé gratuitement en cas de défauts de fabrication et/ou de matériau moyennant la présentation d'une preuve d'achat valable (la réclamation doit être déposée dans la période de garantie). La garantie ne s'applique pas si le défaut constaté est dû à une utilisation inappropriée du produit ou à une utilisation sur plusieurs patients. Pour utiliser ce service, vous devez contacter votre revendeur. Vous êtes prié de retourner le produit nettoyé en suivant les instructions d'entretien.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Le fabricant recommande de remplacer le produit six mois après la première utilisation si le produit est utilisé régulièrement.

Vous pouvez noter la date de première utilisation au dos de ce document.

Regardez notre vidéo d'instruction ici: uqr.to/OffFR ou scannez ce code QR:



Plus d'informations sur www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Descalzador de medias de compresión médica

Información importante antes de empezar a usar el producto:

- A.** Si le cuesta llegar a los dedos de los pies, coloque el pie sobre una silla baja para evitar tener que doblarse demasiado.
- B.** Use guantes antideslizantes especiales cuando utilice el producto. Así, podrá sujetar mejor la media y necesitará hacer menos fuerza.



Quitar

Instrucciones para quitarse la media:

1. Coloque el Easy-Off sobre la media
2. Apriete bien la correa de velcro justo por encima del tobillo.
3. Doble el material sobrante sobre la tira de velcro todo lo que pueda.
4. Doble la media sobre Easy-Off todo lo que pueda.
5. Con pequeños movimientos empezando por el talón, deslice la media y Easy-Off por el pie.

TALLAS


REF	Talla	Número de zapato EU	Número de zapato UK		Número de zapato US	
			mujer	hombre	mujer	hombre
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Easy-Off de Arion Slide Solutions minimiza la fricción entre la media de compresión y la piel gracias a las propiedades deslizantes únicas del producto que le proporciona el material especial del que está hecho y por su revestimiento. La menor fricción facilita especialmente que la media se deslice por la zona del talón, que es la parte más ancha del pie.

UNA SOLUCIÓN SEGURA Y SENCILLA

- Reduce el esfuerzo físico del paciente y del personal de enfermería.
- Contribuye a prolongar la vida de la media y a mantener la compresión original más tiempo evitando que los dedos o las uñas dañen la media y evitando que se estire en exceso y se deforme.
- Facilita la autonomía de las personas usuarias de medias de compresión y ayuda a cumplir con el tratamiento.

COMPOSICIÓN

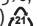- Producto: Poliamida 92 %, poliuretano 3 %, silicona 2 %, poliéster 3 %
- Embalaje: Cartón cromado GC1 (PAP21) 


CONTRAINDICACIONES

- No use el producto si tiene alergia a alguno de los componentes (ver composición).
- Las heridas abiertas deben cubrirse con un apósito adecuado antes de usar el producto.

ADVERTENCIAS

- **Peligro de asfixia:** mantenga el producto alejado de bebés, niños y mascotas.
- **Peligro de resbalamiento:** no pise el producto. Material muy resbaladizo.
- **Solo para uso externo /** adecuado para el contacto con la piel. Acuda a un médico si se produce irritación.

IMPORTANTE

-  Lea atentamente las instrucciones de uso. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el distribuidor.
- Guarde el embalaje y las instrucciones de uso mientras utilice el producto.
- Debe informarse al fabricante y a la autoridad de supervisión competente de todos los problemas graves que se produzcan al usar el producto.
- Al utilizar el producto es importante que la persona usuaria elija la talla del producto adecuada. Si usa una talla incorrecta, puede que el producto no funcione como es debido y que se dañe o desgaste más rápido de lo normal. La talla correcta se elige según el número de zapato.
- El producto debe usarlo una sola persona. Si van a usar el producto varias personas, desinfectelo antes con una solución de etanol al 70 %.

ALMACENAMIENTO

Manténgalo alejado de la luz directa del sol u otras fuentes de calor. 


INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Lavar a mano a máx. 30 °C / 86 °F.
- No usar lejía.
- No usar secadora. Secar el producto con una toalla.
- No usar plancha.
- No limpiar en seco.
- Se puede desinfectar con una solución de etanol al 70 %.

GARANTÍA

Este producto tiene un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra por defectos derivados del material o la fabricación. Dentro del período de garantía, el producto se cambiará por otro sin coste si presenta defectos de fabricación o de materiales. El cambio de un producto en garantía solo se efectuará si se puede demostrar mediante un recibo de compra que la fecha en que se presentó la reclamación está dentro del período de garantía. No cubre defectos por un uso inadecuado del producto o por usarlo en varias personas. Para este servicio, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. Deberá devolver el producto lavado siguiendo las instrucciones de cuidado.

RECOMENDACIÓN DE USO

 El fabricante recomienda sustituir el producto seis meses después del primer uso si el producto se utiliza con frecuencia.

Puede escribir la fecha del primer uso en la parte de atrás de este documento.

Vea nuestro vídeo con las instrucciones aquí: uqr.to/OffES o escanee este código QR:



Más información en www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Auxiliar para descalçar meias de compressão médica

Informação importante antes de começar a utilizar o produto:

- Se tiver dificuldade em alcançar os dedos dos pés, por favor, coloque o pé numa cadeira baixa para evitar dobrar-se demasiado.
- Use luvas especiais antiderrapantes quando utilizar o produto. Isto dá-lhe a máxima aderência sobre a meia e reduz a força física necessária.



Descalçar

Instruções para descalçar:

- Coloque o Easy-Off sobre a meia
- Aperte firmemente a correia de velcro logo acima do tornozelo
- Dobre a parte restante do dispositivo auxiliar sobre a correia de velcro, tanto quanto possível
- Dobre a meia sobre o Easy-Off, tanto quanto possível
- Com pequenos movimentos, começando no calcanhar, deslize a meia e o Easy-Off sobre o pé

MEDIDAS

REF	Tamanho	Tamanho do calçado EU	Tamanho do calçado UK		Tamanho do calçado US	
			mulher	homem	mulher	homem
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

O dispositivo auxiliar **Easy-Off da Arion Slide Solutions** minimiza o atrito entre a peça de compressão e a pele, graças às propriedades deslizantes únicas do produto proporcionadas pelo material especial de que é feito e pelo seu revestimento. A redução do atrito é particularmente útil para fazer deslizar a meia sobre a zona do calcanhar, que é a parte mais saliente do pé.

SOLUÇÃO FÁCIL, SEGURA E SIMPLES

- Reduz a tensão física tanto para os utilizadores da meia de compressão como para os prestadores de cuidados
- Pode contribuir para uma maior durabilidade da meia e para manter a compressão original por mais tempo, evitando danos causados por dedos ou unhas e evitando o alongamento excessivo e a má colocação
- Promove a independência dos utilizadores da meia de compressão e ajuda ao cumprimento e sucesso da terapia

COMPOSIÇÃO

- Produto: Poliamida 92%, Poliuretano 3%, Silicone 2%, Poliéster 3%
- Embalagem: Caixa de cartão cromada GC1 (PAP21)

CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilize o produto se for alérgico a um dos seus componentes (ver composição).
- As feridas abertas devem ser cobertas com um penso apropriado antes de se utilizar o produto.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

- Perigo de asfixia:** mantenha o produto afastado das crianças e dos animais.
- Perigo de escorregamento:** não pise nem ande sobre o produto. Material altamente escorregadio.
- Indicado apenas para uso externo.** /Destinado ao contacto com a pele. Procurar assistência médica se surgir irritação.

IMPORTANTE

- Por favor, leia atentamente as instruções de utilização. Se tiver alguma dúvida, contacte o revendedor da sua área.
- Guarde a embalagem e as instruções de utilização durante o tempo de utilização do produto.
- Todos os acidentes graves que ocorram durante a utilização do produto devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade supervisora competente.
- Ao utilizar o produto, é importante que este corresponda ao tamanho certo de calçado do utilizador. A utilização de um tamanho incorreto impedirá o funcionamento normal do produto e este pode ficar danificado ou desgastar-se demasiado depressa. O tamanho correto é determinado pelo tamanho do seu calçado.
- Utilizar o produto numa única pessoa. Se o produto precisar de ser utilizado em outras pessoas, deve desinfecá-lo antes com uma solução de etanol a 70 %.

ARMAZENAMENTO

Mantem afastado da luz solar direta ou de outras fontes de calor.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Lavar à mão, a uma temperatura máx. de 30°C/86°F.
- Não aplicar lixívia no produto.
- Não colocar na máquina de secar. Secar o produto apenas com uma toalha.
- Não passar a ferro.
- Não limpar a seco.
- Desinfecção possível com uma solução de etanol a 70 %.

GARANTIA

O presente artigo está garantido, por um período de seis meses a partir da data de compra, contra defeitos que resultem de material defeituoso ou fabrico deficiente. Dentro do período de garantia, o artigo será trocado sem quaisquer custos, no caso de haver defeitos de fabrico e/ou de material. Qualquer troca ao abrigo da garantia só será efetuada se for possível demonstrar, através do recibo de compra, que a data em que a reclamação foi apresentada está dentro do período de garantia. A garantia não se aplica se o defeito for resultado de uma utilização incorreta do produto, ou se for devido à sua utilização em vários doentes. Para recorrer a este serviço, é necessário contactar o fornecedor da sua área. Ser-lhe-á pedido que devolva o produto lavado e que siga as instruções para a limpeza do mesmo.

RECOMENDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

O fabricante recomenda a substituição do produto seis meses após a primeira utilização, se o produto for utilizado regularmente.

Pode escrever a data da primeira utilização no verso deste documento.

Veja o nosso vídeo de instruções aqui: uqr.to/Offen
ou digitalize este código QR:

Mais informações em www.slide-solutions.com



Arion Easy-Off

Dispositivo per togliere le calze compressive medicali

Informazioni importanti prima dell'uso del prodotto:

- A.** Se si hanno difficoltà a raggiungere le dita dei piedi, mettere il piede su una sedia bassa per evitare di piegarsi troppo.
- B.** Quando si usa il prodotto, indossare guanti antiscivolo speciali. Questo permette di avere la massima presa sulla calza e di ridurre la forza fisica necessaria.



Togliere

Istruzioni per togliere le calze:

- 1.** Poggiare Easy-Off sulla calza
- 2.** Fissare saldamente la fascia in velcro proprio sopra la caviglia
- 3.** Ripiegare la parte superiore del prodotto sulla fascia di velcro il più possibile
- 4.** Ripiegare la calza sul Easy-Off il più possibile
- 5.** Con piccoli movimenti, partendo dal tallone, far scivolare la calza e il Easy-Off sul piede

SCelta DELLA TAGLIA

REF	Taglia	Numero di scarpa EU	Numero di scarpa UK		Numero di scarpa US	
			donna	uomo	donna	uomo
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ^{1/2} - 4 ^{1/2}	2 ^{1/2} - 4	4 - 6 ^{1/2}	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	7 - 9	5 ^{1/2} - 7 ^{1/2}
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ^{1/2} - 10	8 - 11	9 ^{1/2} - 11 ^{1/2}	8 - 10

Easy-Off di Arion Slide Solutions riduce al minimo la frizione tra l'indumento di compressione e la pelle grazie alle proprietà di scorrimento esclusive dello speciale materiale utilizzato e del suo rivestimento. La riduzione della frizione è particolarmente utile per far scivolare l'indumento sulla zona del tallone, che è la parte più larga del piede.

UNA SOLUZIONE FACILE, SICURA E SEMPLICE

- Riduce lo sforzo fisico degli utilizzatori degli indumenti di compressione e del personale di assistenza
- Può contribuire a una durata superiore dell'indumento e mantenere più a lungo la compressione originale, prevenendo i danni causati dalle dita o dalle unghie ed evitando gli stiramenti eccessivi e la deformazione
- Favorisce l'indipendenza di chi indossa gli indumenti di compressione e promuove l'aderenza alla terapia

COMPOSIZIONE

- Prodotto: Poliammide 92%, Poliuretano 3%, Silicone 2%, Poliestere 3%
- Imballaggio: Cartone cromato GC1 (PAP21)

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno dei suoi componenti (vedere composizione).
- Le piaghe aperte devono essere coperte con un bendaggio appropriato prima di usare il prodotto.

⚠️ AVVERTENZE

- **Rischio di soffocamento:** non lasciare il prodotto alla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- **Rischio di scivolamento:** non camminare sul prodotto. Materiale molto scivoloso.
- **Solo per uso esterno /** Destinato al contatto con la pelle. Consultare un medico in caso di comparsa di irritazioni.

IMPORTANTE

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Per eventuali domande, contattare il proprio rivenditore.
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni d'uso durante il periodo di utilizzo del prodotto.
- Tutti gli incidenti gravi che avvengono durante l'utilizzo del prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità di controllo competente.
- È importante utilizzare il prodotto nella taglia giusta per l'utilizzatore. L'uso di una taglia sbagliata impedirà il corretto funzionamento del prodotto che rischia di danneggiarsi o usurarsi troppo rapidamente. La taglia corretta si basa sul numero di scarpa dell'utilizzatore.
- Il prodotto deve essere usato da una sola persona. Se il prodotto deve essere usato da più di una persona, disinfettarlo prima con una soluzione di etanolo al 70%.

CONSERVAZIONE

Tenere al riparo dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Lavare a mano, a una temperatura massima di 30°C/86°F.
- Non candeggiare.
- Non asciugare in asciugatrice. Asciugare il prodotto esclusivamente con una salvietta.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.
- Disinfezione possibile con una soluzione di etanolo al 70%.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto derivante dal materiale o dalla fabbricazione. Durante il periodo di garanzia, il prodotto sarà sostituito gratuitamente in caso di difetti di fabbricazione e/o di materiale. Qualsiasi sostituzione nell'ambito della garanzia sarà effettuata solo se è possibile dimostrare, mediante presentazione di una ricevuta d'acquisto, che la data in cui è stato presentato il reclamo rientra nel periodo di garanzia. La garanzia non si applica se il difetto è dovuto all'uso improprio del prodotto o all'utilizzo su diversi pazienti. Per utilizzare questo servizio è necessario contattare il proprio fornitore. Si prega di restituire il prodotto lavato e di seguire le istruzioni per la cura.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Il produttore raccomanda di sostituire il prodotto sei mesi dopo il primo utilizzo se viene usato regolarmente.

Sul retro di questo documento è possibile scrivere la data del primo utilizzo.

Guardare il nostro video di istruzioni qui:

uqr.to/OffIT

o scansionare questo codice QR:

Maggiori informazioni sul sito www.slide-solutions.com



Arion Easy-Off

Hjælp til aftagning af kompressionsstrømper

Vigtig information inden du begynder at bruge produktet:

- Hvis du har svært ved at nå dine tæer, kan du sætte din fod på en lav stol for at undgå at bøje dig for meget.
- Brug specielle skridsikre handsker, når du bruger produktet. Det giver dig maksimalt greb om strømpen, og reducerer den nødvendige fysiske styrke.



Fra

Instruktioner til aftagning:

- Skub Easy-Off over strømpen
- Fastgør velcrobåndet godt lige over anklen
- Fold reservematerialet så langt som muligt ned over velcrobåndet
- Fold strømpen så langt som muligt over Easy-Off
- Skub strømpen og Easy-Off over foden med små bevægelser, startende ved hælen

STØRRELSER


REF	Størrelse	Skostørrelse EU	Skostørrelse UK		Skostørrelse US	
			kvinder	mænd	kvinder	mænd
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ^{1/2} - 4 ^{1/2}	2 ^{1/2} - 4	4 - 6 ^{1/2}	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	7 - 9	5 ^{1/2} - 7 ^{1/2}
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ^{1/2} - 10	8 - 11	9 ^{1/2} - 11 ^{1/2}	8 - 10

Easy-Off fra Arion Slide Solutions minimerer friktionsmodstanden mellem kompressionstøj og hud takket være produktets unikke glideegenskaber, der skyldes det specielle materiale, det er lavet af, og dets belægning. Den nedsatte friktion er især nyttig, når tøjet skubbes ned over hælområdet, som er den bedreste del af foden.

EN NEM, SIKKER OG SIMPEL LØSNING

- Reducerer fysisk belastning for både kompressionsbærere og plejepersonale
- Kan bidrage til en længere levetid for tøjet, og til at opretholde den oprindelige kompression i længere tid ved at forhindre skader på fingre eller negle, og undgå overstrækning og forvrængning
- Fremmer uafhængighed hos kompressionsbærere og støtter behandlingen

SAMMENSÆTNING

- Produkt: Polyamid 92 %, polyurethan 3 %, silikone 2 %, polyester 3 %
- Emballage: Chromo-karton GC1 (PAP21) 


KONTRAINDIKATIONER

- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for en af dets bestanddele (se sammensætningen).
- Åbne sår skal dækkes med en passende forbindelse, inden produktet bruges.

⚠ ADVARSLER

- **Kvælningsfare:** Hold produktet væk fra babyer, børn og kæledyr.
- **Snublefare:** Træd ikke på produktet. Materialet er meget glat.
- **Kun til udvortes brug/beregnet til hudkontakt.** Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

VIGTIGT

-  Læs brugsanvisningen nøje.
- Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din forhandler.
- Gem emballagen og brugsanvisningen, så længe du bruger produktet.
- Alle alvorlige hændelser, der opstår ved brug af produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente tilsynsmyndighed.
- Når du bruger produktet, er det vigtigt at finde den rigtige produktstørrelse. Brug af en forkert størrelse forhindrer produktet i at fungere korrekt, og det kan blive beskadiget eller blive slidt for hurtigt. Den korrekte størrelse bestemmes af brugerens skostørrelse.
- Brug kun produktet til en enkelt person. Hvis produktet skal bruges til mere end én person, skal produktet først desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

OPBEVARING

Opbevares væk fra direkte sollys eller andre varmekilder. 

PLEJEANVISNINGER



- Vaskes i hånden ved maks. 30 °C/86°F.
- Må ikke bleges.
- Må ikke tørretumbles. Tør kun produktet med et håndklæde.
- Må ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Kan desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

GARANTI

Dette produkt er garanteret i en periode på seks måneder fra købsdatoen mod mangler som følge af defekt materiale eller konstruktion. Inden for garantiperioden byttes produktet gratis i tilfælde af produktions- og/eller materialefejl. Enhver ombytning under garantien gennemføres kun, hvis det ved en købskittering kan påvises, at datoen for indgivelsen af klagen falder inden for garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis manglen skyldes forkert brug af produktet eller anvendelse til flere patienter. For at udnytte denne service skal du kontakte din leverandør. Du bliver bedt om at returnere produktet vasket, og at følge plejeinstruktionerne.

ANBEFALINGER TIL BRUG



Producenten anbefaler, at produktet udskiftes seks måneder efter første brug, hvis det bruges regelmæssigt.

Du kan skrive datoen for første brug på bagsiden af dette dokument.

Se vores instruktionsvideo her: uqr.to/OffDA eller scan denne QR-kode:



Få mere information på www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Avklädningshjälpmedel för medicinska kompressionsstrumpor

Viktig information innan du börjar använda produkten:

- Om du har svårt att nå dina tår kan du placera foten på en låg pall för att undvika att böja dig för mycket.
- Använd särskilda halksäkra handskar när du använder produkten. Detta ger dig maximalt grepp om strumpan och minskar den fysiska styrka som behövs.



Av

Instruktioner för avtagning:

- Placera Easy-Off över strumpan
- Fäst kardborrebandet ordentligt strax ovanför fotleden
- Vik ner överblivet material över kardborrebandet så långt som möjligt
- Vik ner strumpan över Easy-Off så långt som möjligt
- Med små rörelser, med början vid hälen, skjuter du strumpan och Easy-Off över foten

STORLEK

REF	Storlek	Skostorlek EU	Skostorlek UK		Skostorlek US	
			dam	herr	dam	herr
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ^{1/2} - 4 ^{1/2}	2 ^{1/2} - 4	4 - 6 ^{1/2}	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	7 - 9	5 ^{1/2} - 7 ^{1/2}
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ^{1/2} - 10	8 - 11	9 ^{1/2} - 11 ^{1/2}	8 - 10

Easy-Off från Arion Slide Solutions minimerar friktionen mellan kompressionsplagg och hud tack vare produktens unikt glidande egenskaper, vilket tillhandahålls genom materialet det är tillverkat av och dess beläggning. Den minskade friktionen är särskilt användbar för att skjuta plagget över hälområdet, som är den bredaste delen av foten.

LÄTT, SÄKER OCH ENKEL LÖSNING

- Minskar den fysiska belastningen för både kompressionsbärare och assistenter
- Kan bidra till ökad livslängd för plagget och för att upprätthålla den ursprungliga kompressionen längre, genom att förhindra skador från fingrar eller naglar samt undvika översträckning och förvrängning
- Främjar kompressionsbärens oberoende och stöder efterlevnad av behandling

MATERIAL

- Produkt: Polyamid 92%, Polyuretan 3%, Silikon 2%, Polyester 3%
- Förpackning: Chromo kartong GC1 (PAP21)



KONTRAIKATIONER

- Använd inte produkten om du är allergisk mot något av dess ingående material (se material).
- Öppna sår ska täckas med lämpligt förband innan produkten används.

⚠ VARNINGAR

- **Kvävningrisk:** Håll produkten utom räckhåll för spädbarn, barn och husdjur.
- **Halkrisk:** Trampa inte på produkten. Mycket hala material.
- **Endast för externt bruk/Avsedd** för hudkontakt. Sök läkare om irritation utvecklas.

VIKTIGT

- Läs bruksanvisningen noggrant. Kontakta din återförsäljare om du har några frågor.
- Behåll förpackningen och bruksanvisningen under produktens användningstid.
- Alla allvariga incidenter som inträffar vid användning av produkten ska rapporteras till tillverkaren och behörig tillsynsmyndighet.
- Vid användning av produkten är det viktigt med rätt storlek som passar användaren. Användning av fel storlek förhindrar att produkten fungerar som den ska och detta kan göra att den blir skadad eller slits ut för snabbt. Rätt storlek avgörs av din skostorlek.
- Använd produkten på en enda person. Om produkten måste användas på fler än en person ska den desinficeras innan med 70 % etanollösning.

FÖRVARING

Utsätt inte för direkt solljus eller andra värmekällor.

SKÖTSELRÅD

- Tvätta för hand vid max. 30 °C / 86 °F.
- Får inte blekas.
- Torktumlas ej. Torka endast produkten med en handduk.
- Stryk inte.
- Kemtvättas ej.
- Desinfektion möjlig med 70 % etanollösning.

GARANTI

Denna produkt garanteras under en period av sex månader från inköpsdatum mot defekter till följd av felaktigheter i material eller konstruktion. Inom garantiperioden kommer produkten att kostnadsfritt bytas ut vid tillverknings- och/eller materialfel. Varje byte enligt garantin kommer endast att genomföras om det kan bekräftas med hjälp av ett inköpskvitto att dagen då klagomålet ingavs ligger inom garantiperioden. Garantin gäller inte om defekten beror på felaktig användning av produkten eller användning på flera patienter. Du måste kontakta din leverantör för att utnyttja garantin. Du ombeds att returnera produkten tvättad och att följa skötselansvisningarna.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Tillverkaren rekommenderar att du byter ut produkten sex månader efter första användning om produkten används regelbundet.

Du kan anteckna datum för första användningstillfälle på baksidan av detta dokument.

Se vår instruktionsvideo här: uqr.to/OffEN eller skanna denna QR-kod:



Mer information finns på www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Avtakingshjelp for medisinske kompresjonsstrømper

Viktig informasjon før du tar i bruk produktet:

- Hvis du synes det er vanskelig å nå tærne dine, kan du plassere foten din på en lav stol slik at du ikke må bøye deg så mye.
- Bruk spesielle, sklihindrende hansker når du bruker produktet. Dette vil gi det beste grepet på strømpene og reduserer den fysiske styrken som trengs.



Av

Avtagningsinstruksjoner:

- Dra Easy-Off over strømpen
- Fest borrelåsen stramt rett over ankelen
- Brett materialet til overs ned over borrelåsen så langt det går
- Brett strømpen over Easy-Off så langt det går
- Med små bevegelser, som begynner ved hælen, drar du Easy-Off over foten

STØRRELSER


REF	Størrelse	Skostørrelse EU	Skostørrelse UK		Skostørrelse US	
			dame	herre	dame	herre
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Easy-Off fra Arion Slide Solutions minsker friksjon mellom kompresjonsplagget og huden takket være produktets unike glideegenskaper grunnet det spesielle materialet det er laget av og belegget. Redusert friksjon er spesielt hjelpsomt for å dra plagget over hælen, som er den bredeste delen av foten.

ENKEL OG TRYGG LØSNING

- Reduserer fysisk belastning for både brukeren og pleiere
- Kan bidra til lenger levetid for plagget og å opprettholde den originale kompresjonen lenger ved å forhindre skade fra fingre og negler og unngår å overstrekke og forvrænge plagget
- Fremmer kompresjonsbrukerens uavhengighet og støtter daglig terapioverholdelse

SAMMENSETNING

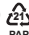- Produkt: Polyamid 92 %, polyuretan 3 %, silikon 2 %, polyester 3 %
- Forpakning: Chromo-kartong GC1 (PAP21) 


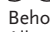
KONTRAINDIKASJONER

- Ikke bruk produktet hvis du er allergisk mot en av komponentene (se sammensetning).
- Åpne sår bør dekkes til med passende sårbehandling før du bruker produktet.


⚠ ADVARSLER

- Kvelningsfare:** Hold produktet unna nyfødte, barn og dyr.
- Sklifare:** Ikke trå på produktet. Veldig glatt materiale.
- Kun for eksternt bruk /** Ment for bruk på hud. Oppsøk lege hvis irritasjon oppstår.

VIKTIG

-  Les bruksanvisningen nøye.
-  Ta kontakt med forhandleren din hvis du har spørsmål.
- Behold forpakning og bruksanvisning så lenge du bruker produktet.
- Alle alvorlige hendelser som oppstår ved bruk av produktet, bør rapporteres til produsenten og de kompetente tilsynsmyndighetene.
- Det er viktig å bruke den riktige produktstørrelsen for brukeren. Å bruke feil størrelse kan forhindre at produktet fungerer på riktig måte, og det kan bli ødelagt eller få slitasje mye raskere. Den riktige størrelsen er avhengig av skostørrelsen din.
- Bruk kun produktet på én person. Hvis produktet må brukes av flere enn én person, må produktet desinfiseres med 70 % etanollosning.

OPPBEVARING

Hold borte fra direkte sollys eller andre varmekilder. 


VASKEINSTRUKSJONER

- Vask for hånd ved maks 30 °C / 86 °F.
- Ikke blek.
- Ikke for bruk i tørketrommel. Kun tørk produktet med et håndkle.
- Ikke stryk.
- Ikke send til renseri.
- Desinfisering er mulig med 70 % etanollosning.

GARANTI

Dette produktet har en garanti på seks måneder fra kjøpsdato mot defekter på grunn av feil ved materialet eller konstruksjon. Innen garantiperioden kan produktet byttes ut med et nytt helt gratis ved produksjonsfeil og/eller feil ved materialet. Bytte under garantien kan kun utføres ved gyldig kvittering der datoen på klagen vises som innenfor garantitiden. Garantien gjelder ikke hvis varen blir ødelagt grunnet feil ved bruk eller bruk på flere pasienter. For å bruke denne tjenesten må du kontakte leverandøren. Det bes om at du returnerer produktet vasket og at du følger vaskeinstruksjonene.

ANBEFALINGER FOR BRUK

 Produsenten anbefaler å erstatte produktet seks måneder etter første bruk hvis produktet brukes jevnlig.

Du kan skrive datoen ved første bruk på baksiden av dette dokumentet.

Se vår instruksjonsvideo her: uqr.to/OffEN eller skann denne QR-koden:



Mer informasjon på www.slide-solutions.com

Arion Easy-Off

Riisumisen apuväline lääkinällisille kompressiosukille

Tärkeitä tietoja luettavaksi ennen tuotteen käytön aloittamista:

- Jos sinun on vaikea yltää varpaisiisi, aseta jalkasi matalan tuolin päälle, jotta et joudu kumartumaan liikaa.
- Käytä erityisiä luistamattomia käsineitä tuotetta käyttäessäsi. Näin saat parhaan mahdollisen otteen sukasta ja tarvitset vähemmän fyysistä voimaa.



Riisuminen

Riisumisohteet:

- Työnnä Easy-Off sukan päälle
- Kiinnitä tarrahihna tiukasti juuri nilkan yläpuolelta.
- Taita ylimääräistä osaa alas tarranauhan päälle mahdollisimman pitkälle.
- Taita sukkaa Easy-Off -apuvälineen päälle mahdollisimman pitkälle.
- Liu'uta sukkaa ja Easy-Off -apuvälinettä jalkaterän yli pienin liikkein, kantapäästä alkaen.

KOOT


REF	Koko	Kengän koko EU	Kengän koko UK		Kengän koko US	
			naiset	miehet	naiset	miehet
Eo 1510	Small	34 - 37	1 ^{1/2} - 4 ^{1/2}	2 ^{1/2} - 4	4 - 6 ^{1/2}	3 - 5
Eo 1511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ^{1/2} - 7 ^{1/2}	7 - 9	5 ^{1/2} - 7 ^{1/2}
Eo 1512	Large	42 - 45	7 ^{1/2} - 10	8 - 11	9 ^{1/2} - 11 ^{1/2}	8 - 10

Yrityksen Arion Slide Solutions Easy-Off -apuvälineen ainutlaatuiset liukuominaisuudet vähentävät kompressiosukan ja ihon välistä kitkaa. Nämä ominaisuudet ovat tuotteen valmistukseen käytetyn erikoismateriaalin ja tuotteen pinnoitteen ansiota. Kitkan vähentämisestä on hyötyä erityisesti liu'utettaessa sukka yli kantapääalueen, joka on jalan levein osa.

HELPPOKÄYTTÖINEN, TURVALLINEN JA YKSINKERTAINEN RATKAISU

- Vähentää sekä kompressiovaatteiden käyttäjien että hoitajien fyysistä rasitusta.
- Voi auttaa pidentämään vaateen käyttöikää ja ylläpitämään alkuperäistä kompressiota kauemmin estämällä sormien tai kynsien aiheuttamia vaurioita sekä liiallista venyttämistä ja väääntämistä.
- Edistää kompressiovaatteiden käyttäjien itsenäisyyttä ja tukee hoitomyönteisyyttä.

KOOSTUMUS

- Tuote: Polyamidi 92 %, Polyuretaani 3 %, Silikoni 2 %, Polyesteri 3 %
- Pakkaus: Chromo-kartonki GC1 (PAP21) 


VASTA-AIHEET

- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosalle (ks. koostumus).
- Avoahaavat tulisi peittää sopivalla siteellä ennen tuotteen käyttämistä.

VAROITUKSET

- Tuokehtumisvaara:** Pidä tuote vauvojen, lasten ja lemmikkieläimien ulottumattomissa.
- Liukastumisvaara:** Älä astu tuotteen päälle. Erittäin liukas materiaali.
- Vain ulkoiseen käyttöön /** tarkoitettu ihokosketukseen. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee ärsytystä.

TÄRKEÄÄ

-  Lue käyttöohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Säilytä pakkaus ja käyttöohjeet niin kauan kuin käytät tuotetta.
- Kaikista tuotteen käytön aikana esiintyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
- Tuotetta käytettäessä on tärkeää valita oikeankokoinen tuote käyttäjälle. Vääräkokoinen tuotetta käytettäessä tuote ei ehkä toimi oikein ja se voi vaurioitua tai kulua liian nopeasti. Oikea koko määräytyy kengännumerosi mukaan.
- Käytä tuotetta yhdellä henkilöllä. Jos tuotetta on käytettävä useammalla kuin yhdellä henkilöllä, desinfioi tuote ensin 70 %:n etanoliliuoksella.

SÄILYTYS

Pidä poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä. 


HOITO-OHJEET

- Käsinpesu, enint. 30 °C / 86 °F.
- Ei saa valkaista.
- Ei saa kuivata kuivausrummussa. Tuotteen saa kuivata vain pyyhkeellä.
- Ei saa silittää.
- Ei saa kuivapestä.
- Desinfiointi mahdollista 70 %:n etanoliliuoksella.

TAKUU

Tälle tuotteelle annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien viallisesta materiaalista tai rakenteesta aiheutuvia vikoja vastaan. Tuote vaihdetaan takuuajana veloituksetta, jos siinä on valmistus- ja/tai materiaalivikoja. Takuun mukainen vaihto tehdään vain, jos voidaan osoittaa ostokuitilla, että reklamaatio on tehty takuuajana. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä tai sen käyttämisestä useilla potilailla. Sinun on otettava yhteyttä toimitajaasi voidaksesi käyttää tätä palvelua. Sinua pyydetään palauttamaan tuote pestynä ja noudattamaan hoito-ohjeita.

KÄYTTÖSUOSITUS


 Valmistaja suosittelee vaihtamaan tuotteen kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta lukien, jos tuotetta käytetään säännöllisesti.

Voit kirjoittaa ensimmäisen käyttöpäivän tämän asiakirjan taakse.

Katso ohjevideomme tästä: uqr.to/OffFI
tai skanna tämä QR-koodi:





Lisätietoja on osoitteessa www.slide-solutions.com

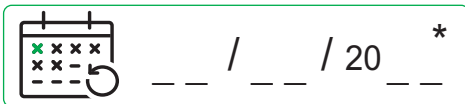

*Date of first use
 *Datum der ersten Verwendung
 *Datum van eerste gebruik
 *Date de la première utilisation
 *Fecha primer uso
 *Data da primeira utilização

*Data del primo utilizzo
 *Dato for første anvendelse
 *Datum för första användning
 *Første bruksdato
 *Ensimmäinen käyttöpäivä

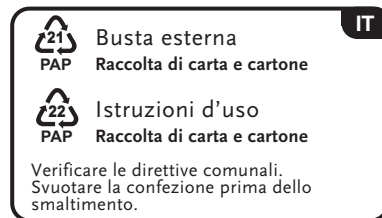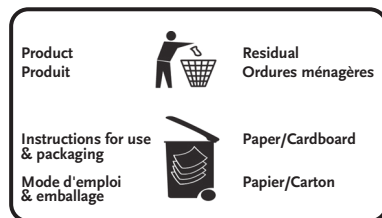

Made in Tunisia	Prodotto in Tunisia
Hergestellt in Tunesien	Laget i Tunisia
Geproduceerd in Tunesië	Produceret i Tunesien
Fabriqué en Tunisie	Tillverkat i Tunesien
Fabricado en Túnez	Valmistettu Tunisiassa
Fabricado na Tunísia	



Medical device	Dispositivo medico
Medizinprodukt	Medicinsk udstyr
Medisch hulpmiddel	Medicinsk utrustning
Dispositif médical	Medisinsk utstyr
Dispositivo médico	Lääkinnällinen laite
Dispositivo médico	

LOD 164252

TSS24-023 Easy-off / REV 08-2024

ARION



Arion Slide Solutions B.V.
 Rutherford 11
 6422 RE Heerlen (NL)
 www.arion-group.com